

Mouse IL-17A ELISA Kit

产品编号	产品名称	包装
PI545	Mouse IL-17A ELISA Kit	96次

产品简介:

- 碧云天的Mouse IL-17A ELISA Kit (Mouse Interleukin-17A Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay Kit), 即小鼠白细胞介素17A酶联免疫吸附检测试剂盒, 是一种用于特异性地高灵敏地定量检测小鼠血清、血浆或细胞培养上清液中的IL-17A的ELISA试剂盒。
- 本产品检测灵敏度高, 特异性强, 重复性好。多次重复检测结果表明, 最小检出量为13.6pg/ml, 与人IFN- γ 和大鼠IFN- γ 等均没有交叉反应, 板内、板间变异系数均小于10%。
- 小鼠白细胞介素17(Interleukin 17, IL-17), 又称IL-17A或CTLA-8, 是一种分子量在21kDa的糖基化多肽, 属于IL-17细胞因子家族。成熟的小鼠IL-17A是由158个氨基酸的前体蛋白剪切掉25个氨基酸信号肽后剩余的133个氨基酸片段组成。在人和小鼠的IL-17A分子中都具有一个保守的N连接糖基化位点。IL-17A能够形成分子量在35-38kDa的同源二聚体或与IL-17形成分子量在45-58kDa的异源二聚体。成熟的小鼠IL-17A分别与人IL-17和大鼠IL-17A具有61%和89%的氨基酸同源性。能够产生IL-17的细胞类型主要有CD4⁺ Th17 T细胞、潘氏细胞、GR1⁺CD11b⁺骨髓抑制细胞、CD27- γ δ T细胞等。
- IL-17A的高亲和力受体是由IL-17 RA和IL-17 RC按2:1所组成的异源多聚体。IL-17 RA是一种分子量在130kDa的I型跨膜糖蛋白, 与其他细胞因子受体、TNF受体或免疫球蛋白受体家族不存在相似性。IL-17 RC也是一种I型跨膜糖蛋白, 其分子量在90-95kDa之间, 与IL-17 RA具有30%的氨基酸同源性。IL-17A和IL-17A/F都能与该受体复合物结合, 发挥功能。
- IL-17A主要参与中性粒细胞的募集, 调控细胞存活。当树突状细胞受到刺激后会分泌IL-23, 随后IL-23会刺激T细胞产生IL-17A。IL-17A分泌后, 诱导基质/成纤维细胞表达粒细胞集落刺激因子(Granulocyte Colony-Stimulating Factor, G-CSF)和干细胞因子(Stem Cell Factor, SCF), 进而促进中性粒细胞分化和激活。IL-17还能够通过直接抑制中性粒细胞凋亡增加中性粒细胞数量。IL-17A能够刺激巨噬细胞产生TNF- α 、IL-1 β 和IL-6, TNF- α 和IL-1 β 又能刺激内皮细胞产生G-CSF, 从而促进中性粒细胞扩增。此外, 在滑膜关节, IL-17还能上调骨细胞NF- κ B受体激活蛋白配体的表达, 促进破骨细胞生成, 促进骨质吸收。
- IL-17A与受体结合后, 通过NF- κ B、C/EBP β 、C/EBP δ 和MAPK信号通路, 诱导成纤维细胞产生IL-6、IL-8、ICAM-1和G-CSG等细胞因子。
- 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法(Sandwich ELISA)检测样品中小鼠IL-17A的浓度, 其原理见图1。小鼠IL-17A特异的单克隆捕获抗体已预包被于酶标板上, 当加入标准品或样品时, 其中的小鼠IL-17A会与捕获抗体结合。当加入生物素化的抗小鼠IL-17A抗体后, 生物素化抗小鼠IL-17A抗体与小鼠IL-17A结合, 形成夹心的免疫复合物。随后加入辣根过氧化物酶标记Streptavidin(HRP-Streptavidin), 由于生物素与链霉亲和素(Streptavidin)可以特异性地结合, 因此链霉亲和素连接的HRP就会与夹心的免疫复合物连接起来而被固相捕获。最后加入显色剂TMB溶液, 固相捕获的辣根过氧化物酶就会催化无色的显色剂氧化成蓝色物质, 在加入终止液后呈黄色。通过酶标仪检测450nm处的吸光度值就能实现定量检测。小鼠IL-17A浓度与A450值呈正比, 通过绘制标准曲线, 对照样品吸光度值, 即可计算出样品中小鼠IL-17A浓度。

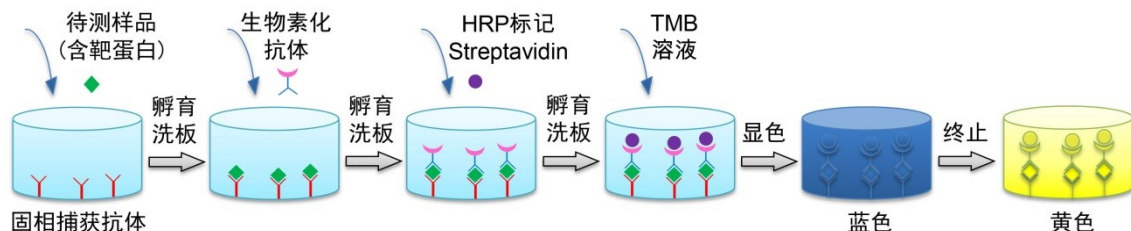


图1. 双抗体夹心ELISA原理图。

- 一个包装的本试剂盒, 包括标准品检测, 可以进行96次检测。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
PI545-1	小鼠IL-17A抗体预包被板	8孔×12条
PI545-2	样品分析缓冲液	5ml
PI545-3	标准品稀释液	10ml
PI545-4	小鼠IL-17A标准品	2-4瓶

PI545-5	小鼠IL-17A生物素化抗体	10ml
PI545-6	辣根过氧化物酶标记Streptavidin	10ml
PI545-7	洗涤液(20X)	30ml
PI545-8	TMB溶液	10ml
PI545-9	终止液	5ml
PI545-10	封板膜(透明)	2张
PI545-11	封板膜(白色)	2张
—	说明书	1份

保存条件:

除标准品外，。标准品4℃保存，1-2周内有效，-20℃保存6个月内有效；试剂盒其它组分4℃保存6个月内有效。除标准品外，试剂盒其它组分严禁冻存

注意事项:

- 由于标准品一般是冻干粉，在制备后需要严格校准，所以标准品的瓶数及每瓶标准品所需加入的稀释液体积请以实际收到的试剂盒及标准品标签上的标注为准。
- 洗涤液(20X)在低温下可能有结晶，如果发现结晶，请室温水浴加热使结晶完全溶解后再配制工作液。
- 为保证标准品的精确性，标准品配制使用后，如果有剩余请勿再次使用。
- TMB溶液请勿接触氧化剂和金属，否则容易失效。
- 加样时，请注意每个样品或标准品必须更换枪头，一方面避免交叉污染，另一方面也避免吸取体积的误差。
- 由于本试剂盒均经过独立测试，所以请勿混用不同货号 and 不同批次的试剂盒组分，即使是同种试剂盒不同批次的试剂盒组分也不能混用。多个试剂盒同时检测时，请独立使用各个试剂盒中的试剂，请勿使用不同试剂盒中相同名称的组分。
- 充分混匀对保证反应结果的精准性很重要，在加液后请轻轻晃动整个96孔板，以保证混匀。
- 本试剂盒很多操作在室温进行，要求严格控制室温在25-28℃。温度低于25℃会导致最终检测到的吸光度显著下降。
- 洗涤过程非常重要，洗涤不充分会使精确度下降并导致结果误差较大。
- 检测标准品和样品时建议设置重复孔，以确保检测结果的可信度。
- 加样过程中须避免气泡的产生。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:

1. 样品准备

- a. 样品的准备请按下列流程进行操作：
 - (a) 细胞上清样品离心取上清即可(如100-500g，5分钟)。
 - (b) 对于血清样品，将全血在室温下放置30分钟至2小时，不要剧烈摇晃以免溶血，待全血自然凝固并析出血清后，4℃约1000-2000g离心10分钟，取黄色上清即得血清，注意不要吸取白色或淡黄色沉淀。制备好的血清需置于冰上待用。
 - (c) 对于血浆样品，采集的全血建议使用EDTA进行抗凝处理，混匀后置冰上，4℃约1000-2000g离心10分钟，取黄色或淡黄色上清即得血浆，注意不要吸取白色沉淀。制备好的血浆需置于冰上待用。
 - (d) 若待测样品不能及时检测，样品制备后请分装，冻存于-20℃或-80℃，并注意避免反复冻融。
 - b. 血清样品不应添加任何防腐剂或抗凝剂。
 - c. 样品应清澈透明，检测前样品中如有悬浮物应通过离心去除。
 - d. 请勿使用溶血、高血脂或污染的样品检测，否则结果将不准确。
- 注：血清或血浆样品可能需要用样品分析缓冲液适当稀释后再检测。

2. 检测前准备工作

- a. 试剂盒从冰箱中取出后应置室温(25-28℃)平衡20分钟；每次检测后剩余试剂请及时置于4℃保存。
- b. 配制适当量的洗涤液：将洗涤液(20X)用双蒸水或去离子水稀释至1X，例如10ml洗涤液(20X)加190ml水混匀后即为1X的洗涤液。
- c. 按标准品标签上标注的体积加入标准品稀释液至1瓶标准品中，室温孵育15分钟(为确保标准曲线的准确性，切勿缩短孵育时间)。随后轻轻混匀并用移液枪吹打几次使标准品彻底溶解，使标准品终浓度达到1000pg/ml。通常每个浓度的标准品需要检测2个孔，每个孔的标准品用量为100μl，共需200μl，同时稀释时还需要使用250μl，因此如果1瓶标准品配制后的体积不足0.45ml，请使用更多瓶数的标准品，并在合并混匀后使用。
- d. 取5个洁净的1.5毫升离心管，每管预先加入250μl的标准品稀释液，并参考图2进行标准品的倍比稀释，最终得到1000、500、250、125、62.5、31.25pg/ml共六个标准品浓度，最后将稀释好的标准品依次加入预包被板孔中，标准品稀释液直接加入作为0pg/ml浓度，共七个标准品浓度。

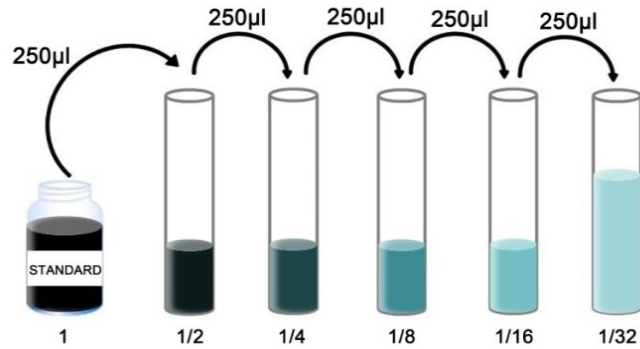


图2. 标准品倍比稀释示意图。按标准品(STANDARD)标签上标注体积加入标准品稀释液溶解并混匀后的浓度为标准品的起始浓度。其它的倍比稀释后的浓度依次为起始浓度的1/2、1/4、1/8、1/16和1/32。

3. 洗涤方法

自动洗板机或手工洗板：每孔洗涤液为300µl，注入与吸出间隔15-30秒。洗板5次。最后一次洗板完成后将板倒扣在厚吸水纸上适当用力拍干。

4. 实验过程需自备的材料和仪器

- a. 不同规格的移液枪及相应的吸头
- b. 酶标仪
- c. 自动洗板机(如果没有也可以手工洗板)
- d. 去离子水或双蒸水

5. 操作步骤

- a. 计算并确定一次实验所需的预包被板条数，取出所需板条放置在96孔框架内，暂时用不到板条请放回铝箔袋密封，保存于4°C。
- b. 每次实验都需配制标准品并绘制出标准曲线，同时建议设置本底校正孔，即空白孔，设置方法为该孔只加TMB溶液和终止液。
- c. 分别将样品或不同浓度标准品按照100µl/孔加入相应孔中，用封板膜(透明)封住反应孔，室温孵育120分钟。对于血清或血浆样品的IL-17的检测，可以加入50µl样品分析缓冲液后加50µl样品；如稀释比例大，将样品与样品分析缓冲液等量加入，不足部分用标准品稀释液补充至100µl。请注意记录好样品的稀释倍数。
注意：请先查阅相关文献确定样品中待检测蛋白的大致浓度，如果该浓度大于或者小于本试剂盒的最高或者最低标准品浓度，请适当稀释或浓缩后再进行检测。
- d. 洗板5次，且最后一次置于厚吸水纸上拍干。
- e. 加入生物素化抗体100µl/孔(注：此生物素化抗体已经预先配制好，可以直接使用，不必再进行稀释)。用封板膜(透明)封住反应孔，室温孵育60分钟。
- f. 洗板5次，且最后一次置于厚吸水纸上拍干。
- g. 加入辣根过氧化物酶标记Streptavidin 100µl/孔(注：此辣根过氧化物酶标记Streptavidin已经预先配制好，可以直接使用，不必再进行稀释)。用封板膜(白色)封住反应孔，室温避光孵育20分钟。室温偏低时(低于25°C)，需要适当延长孵育时间。
- h. 洗板5次，且最后一次置于厚吸水纸上拍干。
- i. 加入显色剂TMB溶液100µl/孔，用封板膜(白色)封住反应孔，室温避光孵育15-20分钟。室温偏低时需要适当延长孵育时间，此时可以孵育至标准品出现非常显著的颜色变化，若样品浓度足够高也会出现显著的颜色变化。
- j. 加入终止液50µl/孔，混匀后立即测量A450值。

6. 结果分析

- a. 复孔的值通常在20%的差异范围内结果才有效，复孔平均值可作为测量值。
- b. 每个标准品或样品的吸光度值应减去本底校正孔的吸光度值(如果没有做校正孔，则不需要减去)。
- c. 绘制标准曲线。以标准品浓度为横坐标，A450值为纵坐标，以平滑线连接各标准品的坐标点。通过样品的吸光度值和标准曲线计算出样品的相应浓度。

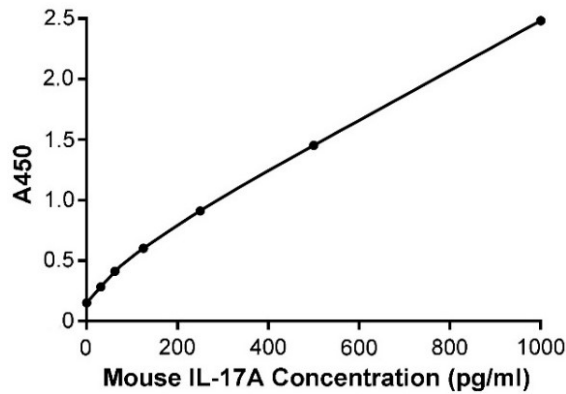


图3. Mouse IL-17A ELISA Kit的标准曲线。实测数据会因实验条件、检测仪器等的不同而存在差异，图中数据仅供参考。

d. 若样品OD值高于标准曲线上限，应当适当稀释后重新测定，计算浓度时需注意乘以样品的稀释倍数。

相关产品：

产品编号	产品名称	包装
PI301	Mouse IL-1 β ELISA Kit	96次
PI303	Rat IL-1 β ELISA Kit	96次
PI305	Human IL-1 β ELISA Kit	96次
PI326	Mouse IL-6 ELISA Kit	96次
PI328	Rat IL-6 ELISA Kit	96次
PI330	Human IL-6 ELISA Kit	96次
PI522	Mouse IL-10 ELISA Kit	96次
PI525	Rat IL-10 ELISA Kit	96次
PI528	Human IL-10 ELISA Kit	96次
PI545	Mouse IL-17A ELISA Kit	96次
PI548	Rat IL-17A ELISA Kit	96次
PI550	Human IL-17 ELISA Kit	96次
PI575	Mouse IL-2 ELISA Kit	96次
PI577	Rat IL-2 ELISA Kit	96次
PI580	Human IL-2 ELISA Kit	96次
PI595	Human IL-22 ELISA Kit	96次
PI612	Mouse IL-4 ELISA Kit	96次
PI615	Rat IL-4 ELISA Kit	96次
PI618	Human IL-4 ELISA Kit	96次

使用本产品的文献：

1. Hui Han,Xiaodan Fu,Jiao Huang,Xianfeng Zhang,Jianyi Yu. PD-1/PD-L1 affects Graves progression through lymphocytes on the proliferation, apoptosis and inflammatory cytokine secretion of thyroid follicular epithelial cells. J Toxicol Sci. 2020;45(11):701-711.;doi: 10.2131/jts.45.701.
2. Huijia Lei,Yiqing Sun,Shiming Quan. IL-37 relieves allergic inflammation by inhibiting the CCL11 signaling pathway in a mouse model of allergic rhinitis. Exp Ther Med. 2020 Oct;20(4):3114-3121.;doi: 10.3892/etm.2020.9078.
3. Aichun Zhang,Yangzi Jin. MicroRNA-182-5p relieves murine allergic rhinitis via TLR4/NF- κ B pathway. Open Med (Wars). 2020 Dec 24;15(1):1202-1212.;doi: 10.1515/med-2020-0198.

Version 2023.03.01