



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology  
 订货热线: 400-1683301或800-8283301  
 订货e-mail: order@beyotime.com  
 技术咨询: info@beyotime.com  
 网址: http://www.beyotime.com


## 通关藤苷H (98%, HPLC)

产品编号	产品名称	包装
SM7004-10mM	通关藤苷 H (98%, HPLC)	10mM×0.2ml
SM7004-5mg	通关藤苷 H (98%, HPLC)	5mg
SM7004-25mg	通关藤苷 H (98%, HPLC)	25mg
SM7004-100mg	通关藤苷 H (98%, HPLC)	100mg

### 产品简介:

#### ➤ 化学信息:

中文名	通关藤苷H
英文名	Tenacissoside H
中文别名	-
英文别名	Tenacissimoside C
来源	通关藤 <i>Marsdenia tenacissima</i> (Roxb.) Wight et Arn.
化合物类型	甾体类(Steroids)>C21甾体
化学式	C <sub>42</sub> H <sub>66</sub> O <sub>14</sub>
分子量	794.97
CAS号	191729-45-0
纯度	98%, HPLC
溶剂/溶解度	DMSO: 100 mg/ml (125.79 mM)
溶液配制	10mg 加入 1.26ml DMSO, 或者 每 7.95mg 加入 1ml DMSO, 配制成10mM溶液。

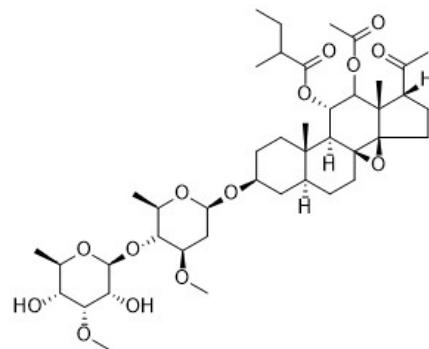

#### ➤ 生物信息

产品描述	Tenacissoside H is a Chinese medicine monomer extracted, isolated from Caulis Marsdeniae tenacissimae.				
信号通路	PI3K/Akt-NF-κB				
靶点	PCNA	-	-	-	-
IC <sub>50</sub>	-	-	-	-	-
体外研究	TDH significantly inhibited cells proliferation in a time-and-dose-dependent manner. TDH arrested the cell cycle in S phase and significantly inhibited PI3K and NF-κB mRNA expression, compared with blank controlled group (P < 0.05).				
体内研究	TDH strongly inhibits tumor growth and volume. PCNA expression was significantly decreased after treatment of TDH. TDH downregulated proteins expression in PI3K/Akt-NF-κB transduction cascade (P < 0.05).				
临床实验	N/A				

### 参考文献:

- Jia YS, et al. Evid Based Complement Alternat Med. 2015:464937.

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
SM7004-10mM	通关藤苷 H (98%, HPLC)	10mM×0.2ml
SM7004-5mg	通关藤苷 H (98%, HPLC)	5mg
SM7004-25mg	通关藤苷 H (98%, HPLC)	25mg
SM7004-100mg	通关藤苷 H (98%, HPLC)	100mg
-	说明书	1 份

## 保存条件：

-20°C避光保存，至少一年有效。固体粉末4°C避光保存，至少一个月有效。如果溶于非DMSO溶剂，建议分装后-80°C避光保存，预计6个月内有效。

## 注意事项：

- 本产品可能对人体有一定的毒害作用，请注意适当防护，以避免直接接触人体或吸入体内。
- 本产品仅限于专业人员的科学的研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

## 使用说明：

1. 收到产品后请立即按照说明书推荐的条件保存。使用前可以在2,000-10,000g离心数秒，以使液体或粉末充分沉降至管底后再开盖使用。
2. 对于10mM溶液，可直接稀释使用。对于固体，请根据本产品的溶解性及实验目的选择相应溶剂配制成高浓度的储备液(母液)后使用。
3. 具体的最佳工作浓度请参考本说明书中的体外、体内研究结果或其它相关文献，或者根据实验目的，以及所培养的特定细胞和组织，通过实验进行摸索和优化。
4. 不同实验动物依据体表面积的等效剂量转换表请参考如下网页：  
<https://www.beyotime.com/support/animal-dose.htm>

Version 2021.05.13